

REVYLINE



RL 066

**SONIC ELECTRIC TOOTHBRUSH
DOUBLE OSCILLATION**

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗВУКОВАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА
С ДВОЙНЫМИ КОЛЕБАТЕЛЬНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Перед первым применением электрической щетки RL 066 внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Технические характеристики	4
Комплектация	4
Меры предосторожности	5
Предупреждения медицинского характера	6
Зарядка аккумулятора	6
Насадки в комплекте	7
Вкл/выкл прибора	7
Выбор режима работы	7
Режимы работы	8
Выбор уровня интенсивности	8
Процесс чистки	9
Уход за зубной щеткой	10
Транспортировка, хранение и утилизация прибора	10
Гарантия	11

Если у вас остались вопросы,
обратитесь в сервисный центр:

 **8 (800) 775-38-49**

 **www.revyline.ru**

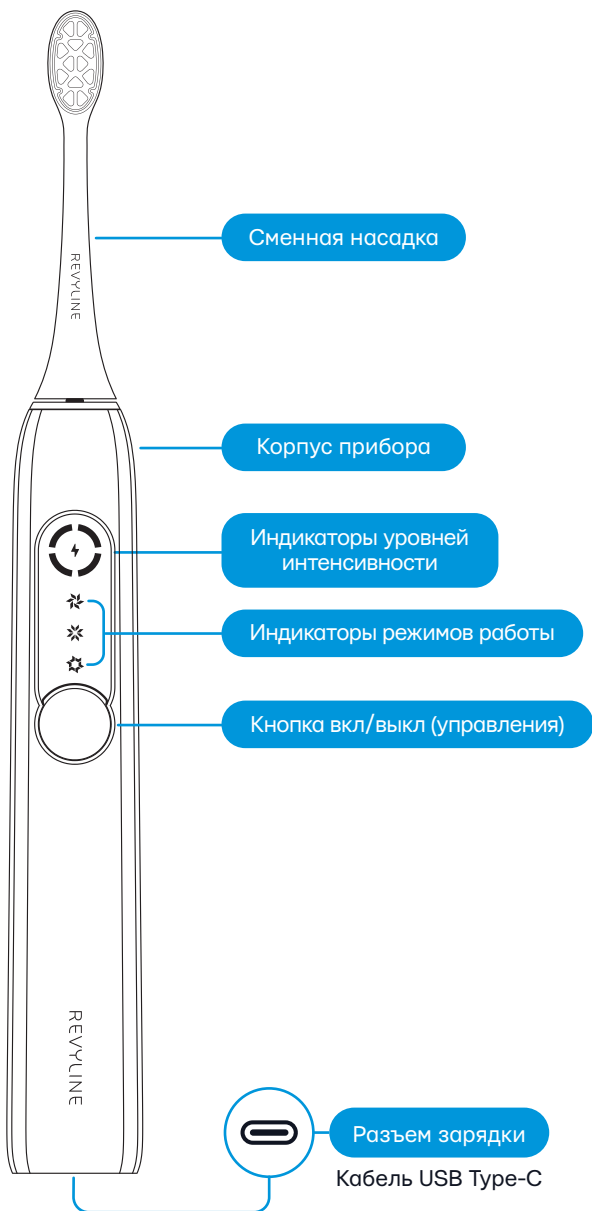

Электрическая звуковая зубная щетка с двойными колебательными движениями

Предназначена для эффективной чистки зубов.

- 2-минутный таймер
- 3 режима работы
- 4 уровня интенсивности в каждом режиме
- Частота колебаний щетинок – 27 000 – 30 000 в мин.
- Диапазон колебательных движений – 45°
- Литиево-ионный аккумулятор – 1200 mAh
- Зарядка через кабель USB Type-C
- Время полной зарядки – 6 ч.
- Аккумулятор держит заряд до 60 дней
- Материал корпуса – АВС-пластик
- Щетина – DuPont
- Влагозащита – IPX7
- Номинальное напряжение – 3,7 В
- Потребляемая мощность – 2 Вт
- Размер изделия – 29,4х29,6х252 мм
- Средний срок службы – 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной блок щетки
- 1 сменная насадка
- Кабель USB Type-C
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров, нанесения вреда себе и окружающим:

- Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Не используйте щетку во время принятия душа.
- Не трогайте влажными руками зарядное устройство, подключенное к электросети.
- Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
- Не используйте прибор при неисправности зарядного устройства или повреждении силового кабеля.
- Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
- Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
- Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
- Не включайте щетку в помещении, где ранее использовался кислород или аэрозоли.
- Перед использованием щетки удалите из полости рта все съемные конструкции.
- Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
- Электрическую зубную щетку Revyline RL 066 не рекомендуется использовать лицами (в т.ч. детьми) с ограниченными физическими возможностями, психическими нарушениями и отсутствием опыта использования подобного прибора.
- Детям до 10 лет следует использовать устройство под присмотром взрослого.
- Небольшое нагревание ручки во время зарядки прибора является нормальным. Но если ручка становится горячей, отключите питание.
- Время от времени следует очищать контакты адаптера питания, чтобы избежать перегрева прибора и поломок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

Небольшая кровоточивость и дискомфорт десен в начале использования данного устройства являются нормой. Если кровотечение и дискомфорт сохраняются более одной недели, следует обратиться к стоматологу.

Если в последние 2 месяца вы перенесли операцию в ротовой полости, установили импланты или протезы, то перед началом использования данного устройства следует проконсультироваться с врачом.

Если у вас установлен кардиостимулятор или другие подобные имплантированные устройства, перед использованием прибора обратитесь к своему врачу.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА



Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB Type-C, который вставляется в разъем, находящийся в основании блока щетки.



Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор щетки. Перед зарядкой щетки убедитесь, что она выключена.



Если при включении индикатор заряда мигает красным, значит щетку следует подзарядить.



Во время зарядки щетки индикатор заряда мигает красным.



Когда зарядка завершена, включается зеленая индикация.



Щетка работает до 60 дней от одного заряда (при двухразовой ежедневной чистке по 2 мин.).

Внимание! Во время зарядки аккумулятора пользоваться устройством нельзя.

НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ


В базовой комплектации зубной щетки RL 066 1 стандартная сменная насадка.



Внимание! Согласно правилам личной гигиены, совместное использование одной насадки различными пользователями недопустимо.

Установка и замена насадки

Установите насадку, надев ее на металлический стержень таким образом, чтобы рабочая поверхность насадки совпадала с лицевой стороной корпуса щетки.

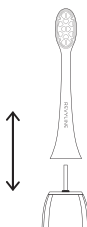

Стоматологи рекомендуют менять насадку каждые 3 месяца для сохранения высокой эффективности гигиены полости рта.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА



Включение или выключение щетки осуществляется коротким нажатием кнопки вкл/выкл.

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ



Выбор режима осуществляется короткими нажатиями кнопки вкл/выкл (управления). При этом на дисплее высвечивается значок выбранного режима.



Щетка запоминает выбранный режим и включает его при последующем использовании.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Электрическая зубная щетка RL 066
позволяет использовать 3 режима работы:

Sensitive 

Бережный режим для чувствительных зубов. Подходит для периода привыкания к электрической модели.

Clean 

Ежедневный уход за зубами и деснами.

White 

Режим отбеливания для придания зубам естественной белизны.

ВЫБОР УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ



Выбор уровня интенсивности осуществляется длительным нажатием кнопки вкл/выкл (управления): выбрав режим, нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл (управления) и следите за подсветкой секторов в верхней части дисплея.



Низкий
уровень
интенсивности



Средние
уровни
интенсивности




Максимальный
уровень
интенсивности



45°

Диапазон (угол)
колебательных движений.


ПРОЦЕСС ЧИСТКИ

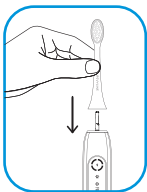


Аккуратно наденьте насадку на посадочное место. Оставьте небольшой зазор между насадкой и корпусом, так как зазор необходим для возможности осуществления вибрации.




Намочите чистящую головку зубной щетки и нанесенную на нее зубную пасту, прежде чем вы приступите к чистке зубов, это поможет зубной пасте лучше воздействовать на поверхность зубов во время чистки.

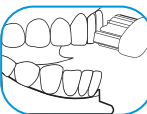

Поднесите насадку щетки к поверхности зубов, расположив параллельно линии десен. Включите щетку. Производите чистку мягко. Не надавливайте слишком сильно, иначе можете травмировать поверхность зубов и десен. Перемещайте чистящую головку медленно, по необходимости совершая возвратно-вращательные движения.

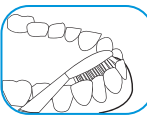

30 сек.

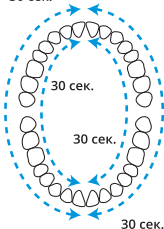

Для обеспечения равномерного очищения разделите полость рта на четыре равных условных зоны и очищайте их поочередно.

Поможет в этом 2-минутный таймер, который каждые 30 секунд будет делать короткую паузу, «информируя» таким образом о том, что пора сменить зону чистки. По прошествии двух минут щетка отключится автоматически.

После завершения чистки тщательно прополощите полость рта чистой водой.

УХОД ЗА ЗУБНОЙ ЩЕТКОЙ

- Регулярно очищайте зубную щетку RL 066.
- Промойте чистящую головку насадки, чтобы удалить остатки пасты после чистки, и дайте ей высохнуть на воздухе.
- Не трите щетину, чтобы не деформировать ее.
- Ополосните рукоятку, чтобы удалить загрязнения после чистки, и высушите мягкой тканью.
- Не погружайте зубную щетку в воду.
- Не чистите зубную щетку агрессивным моющим средством и при температуре воды выше +40 °C.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, которая предохраняет изделия от механических повреждений, попадания на них грязи и влаги.

Хранить изделия необходимо в упаковке изготовителя в помещении с вентиляцией вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от 0 °C до +20 °C.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на прибор – 2 года.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание щетки осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

- На расходные материалы и комплектующие.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению, неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям, модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом), нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания.
- На товары, эксплуатировавшиеся с неустраненными недостатками.
- На неисправности, которые вызваны независимыми от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь посторонних предметов и жидкостей.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

REVYLINE

главный секрет вашей улыбки