

# REVYLINE


## Infant RL 025

### SONIC ELECTRIC TOOTHBRUSH

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
ЗВУКОВАЯ  
ЗУБНАЯ ЩЕТКА

0-3  
years

### BABY

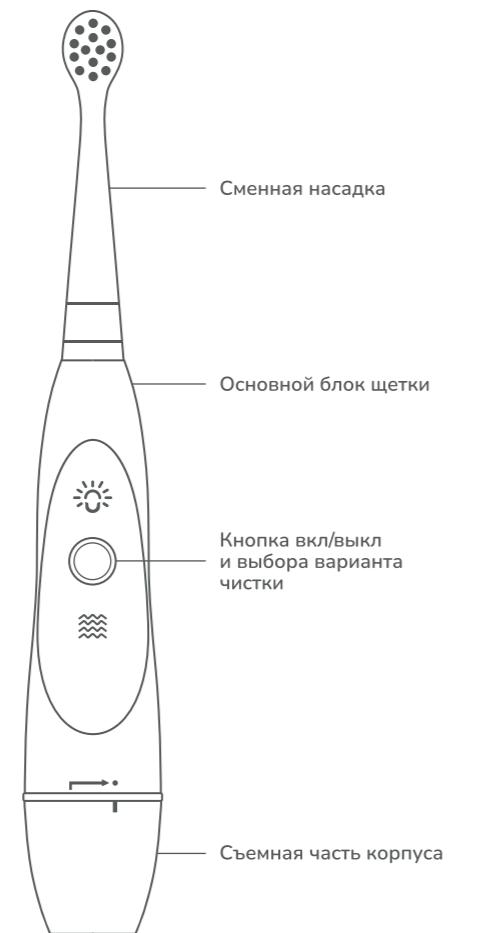

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: RL 025 Infant

Предназначена для эффективной  
чистки зубов.

- Для детей от 0 до 3 лет
- 3 варианта чистки
- Функция «Фонарик»
- Частота колебаний щетинок – 16 000 в мин.
- 2-минутный таймер
- Работает от одной батарейки AAA
- Влагозащита – IPX7
- Материал корпуса – АВС-пластик
- Размер изделия – 26x26x175 мм
- Размер чистящей поверхности – 12x10x0,85 мм
- Диаметр щетины – 0,127 мм
- Гарантия – 2 года
- Средний срок службы – 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

[www.revyline.ru](http://www.revyline.ru)

Более подробная информация о мерах  
предосторожности, предупреждениях  
медицинского характера, зарядке  
аккумулятора, процессе чистки, уходе за  
зубной щеткой, гарантийных случаях –  
на сайте.

#### СОБЕРИ СВОЮ ЛУЧШУЮ ЛИНЕЙКУ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА REVYLINE

##### Ирригаторы



Ирригатор генерирует пульсирую-  
щую водную струю под давлением,  
которая вымывает зубной налет  
и микрочастицы пищи из самых  
труднодоступных мест. При этом  
происходит массаж десен.

##### Мануальные щетки



При выборе мануальной щетки  
важно обращать внимание на  
следующее: у щетки должна быть  
высокая плотность щетины, кончики  
щетинок должны быть скругленны-  
ми, а головка – компактной.



Монопучковая щетка используется  
для точечного очищения зубов,  
особенно дальних. Она незаменима  
при уходе за брекетами и другими  
ортодонтическими конструкциями.

##### Зубные нити



Нить эффективно очищает  
пространства между зубами.  
В ассортименте Revyline –  
плоские и круглые, вощенные  
и невощенные нити.

##### Бальзамы и ополаскиватели



Бальзамы и ополаскиватели  
предназначены для гигиенического  
ухода, профилактики и лечения  
стоматологических заболеваний.  
Используются как средства  
для ополаскивания полости рта  
и для приготовления растворов  
для процедур ирригации.

##### Зубные пасты



Зубная паста – дополнительное  
средство ухода за полостью рта.  
К ее выбору нужно подходить  
индивидуально, учитывая состав,  
предназначение, уровень абразив-  
ности и прочее.

##### Скребки для языка



Скребок удаляет бактериальный  
налет с поверхности языка, что  
предотвращает развитие целого  
ряда стоматологических заболе-  
ваний.

##### Межзубные ершики



Ершик эффективен при очищении  
межзубных промежутков и  
боковых поверхностей зубов,  
незаменим при уходе за  
несъемными ортодонтическими  
конструкциями, имплантатами  
и оголенными шейками зубов.

# REVYLINE

Спасибо, что выбираете Revyline!

Благодаря вам мы развиваем наш бренд и делаем  
гигиену полости рта эффективной и осознанной, ведь  
главная наша цель – забота о красоте и здоровье людей.

Вместе с вами мы поддерживаем  
школы, сады, больницы, детские  
дома, благотворительные и учебные  
проекты и главное дарим улыбки  
тем, кому они необходимы!

Максим Обушенков,  
врач-стоматолог,  
руководитель компании Revyline  
 @freshmax13

Revyline – международная компания, основанная  
в 2013 году врачом-стоматологом. Товары бренда  
одобрены стоматологическими институтами.

Продукция Revyline имеет сертификат CE и РУ  
Минздрава на медизделия.

Revyline сотрудничает с тысячами докторов  
и клиник. Продукция создается при участии  
стоматологов и рекомендована экспертами.

Напишите о Ваших впечатлениях о купленном  
приборе на той площадке, где Вы приобрели его,  
пришлите ссылку на опубликованный отзыв  
в WhatsApp +7 969 010 30 87

и получите 200 руб.  
на Ваш телефон за отзыв!

Если вдруг что-то пойдет не так, просто позвоните:  
 +7 969 010 30 87

Всегда с Вами, Ваш Revyline


8 (800) 775-38-49 www.revyline.ru



## Поздравляем!

Вы приобрели детскую звуковую зубную щетку, которая сделает зубы вашего ребенка здоровыми и красивыми. Модель RL 025 Infant – это новый уровень чистоты уже после первого применения.

Чистим зубки  
играючи!

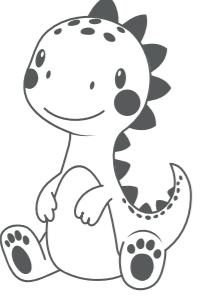

## НАЧАЛО РАБОТЫ

### Установка и замена батарейки

В комплектации щетки – батарейка AAA.

Чтобы установить или заменить батарейку, поворотным движением против часовой стрелки отсоедините от корпуса щетки нижнюю часть блока, вставьте батарейку и поворотным движением по часовой стрелке присоедините нижнюю часть блока к корпусу щетки.



### Насадки в комплекте

В базовой комплектации зубной щетки RL 025 Infant 2 стандартные сменные насадки.



Внимание! Согласно правилам личной гигиены, совместное использование одной насадки различными пользователями недопустимо.

### Установка и замена насадки

Наденьте насадку на пластиковый стержень так, чтобы щетина насадки смотрела вправо. Затем поверните насадку до упора по часовой стрелке на 90°, чтобы рабочая поверхность насадки совпала с лицевой стороной корпуса.



Стоматологи рекомендуют менять насадку каждые 3 месяца для сохранения высокой эффективности гигиены полости рта.

### Включение/выключение прибора и выбор варианта подсветки

Нажмите кнопку вкл/выкл, чтобы включить щетку.

Выбор варианта чистки осуществляется последовательным нажатием кнопки вкл/выкл.

Любой выбранный режим сохраняется в памяти и воспроизводится при последующем использовании щетки.

Чтобы выключить щетку, еще раз нажмите кнопку вкл/выкл.



### Варианты чистки и подсветки

Электрическая зубная щетка RL 025 Infant позволяет использовать 3 варианта чистки и функцию «Фонарик»:

LED Вариант 1. С белой подсветкой.

RGB Вариант 2. С разноцветной подсветкой.

Вариант 3. Без подсветки.

Функция «Фонарик»: контроль качества чистки взрослыми (щетка используется без насадки).

### ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

Стоматологи рекомендуют дочищать детям зубы до 12 лет

0–6 лет  
Каждый день

6–9 лет  
Раз в 3–4 дня

9–12 лет  
При необходимости.  
Раз в неделю контроль качества чистки индикатором налета.

С 12 лет  
Контроль чистки с индикатором, работа со стоматологом.



- RL 025 Infant не рекомендуется использовать детьми с ограниченными физическими возможностями, психическими нарушениями и отсутствием опыта использования подобного прибора.

- Небольшая кровоточивость и дискомфорт десен в начале использования щетки являются нормой. Если кровотечение и дискомфорт сохраняются более одной недели, обратитесь к стоматологу.

### ПРОЦЕСС ЧИСТИКИ

Поворотным движением установите насадку.

Намочите щетину и нанесите на нее пасту.

Расположите насадку параллельно десне и включите щетку.

Разделите полость рта на 4 условные зоны и очищайте их поочередно. Не давите на щетку сильно, головку перемещайте медленно, совершая возвратно-вращательные движения. Спустя 2 минуты щетка отключится автоматически.

После завершения чистки прополосните рот чистой водой.

В щетку встроен таймер, благодаря которому автоматическое отключение питания происходит через 2 минуты работы прибора. Каждые 30 секунд щетка делает небольшую паузу, позволяя сменить зону чистки.



### Транспортировка, хранение и утилизация прибора

- Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, которая предохраняет изделия от механических повреждений, попадания на них грязи и влаги.
- Хранить изделия необходимо в упаковке изготовителя в помещении с вентиляцией вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от 0 °C до +20 °C.
- Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

### Гарантия

#### Гарантия на прибор – 2 года

Гарантийное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание щетки осуществляется за счет покупателя.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основной блок щетки

Сменная насадка – 2 шт.

Батарейка AAA

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Место для печати

По всем вопросам обращайтесь  
на горячую линию:

8 (800) 775-38-49 [www.revyline.ru](http://www.revyline.ru)

Импортер:  
ИП Обушенков М.А.,  
г. Элиста, ул. Джангары, д. 7

Производитель:  
Shenzhen Fortunecome Technology Co., Ltd  
No.57 Shangxia Road, Shangxiawei,  
Yuanshan Street, Longgang District,  
Shenzhen City, China/Китай  
Сделано в Китае